

安全注意事项

- 为避免使用者因使用不当而遭受危害或损失，在使用之前，请仔细阅读“产品说明书”以便正确使用；
- 在注意事项中写明了因使用不当而带来的危害、损失大小，将安全注意事项分为“危险”“警告”、“注意”三个部分；
- 请在阅读后将本说明书放于使用者随时可以参阅的地方，并妥善保存。

图例说明

	表示禁止不允许做的事情，否则有可能因误动作而导致危险
	表示强制必须遵守，否则会引起事故或产生身体不适

 危险

切勿与下列电子医疗器械一起使用	
1) 心律调整器等体内植入型医疗电子仪器； 2) 人工心肺起搏器等生命维持用医疗电子仪器； 3) 心电图等佩戴型医疗用电子仪器	

 警告

下列情形，请向医生咨询后使用，否则会引起事故或不良后果	
1) 恶性肿瘤患者； 2) 月经期和孕妇者； 3) 心脏病患者； 4) 皮肤无触感症和皮肤异常者； 5) 血压异常高者；	
1) 请勿在心脏部、头部、面部、口内、阴部、皮肤疾患等部位使用 2) 请勿与其他医疗器械、外涂剂（包括喷雾式）等并用 3) 治疗以外的目的请勿使用 4) 请勿把电极片导线的插头插入主机以外的地方	
请勿擅自拆卸、修理、改造本产品	

 注意

1) 如感到治疗器和身体有异常，请停止使用 2) 治疗过程中，勿移动电极片	
1) 勿给儿童和无表达意识的人使用 2) 请勿在浴室等湿度高的地方使用 3) 就寝和驾驶时勿使用 4) 请勿过长时间把电极片贴在患处 5) 请勿用于治疗以外的其它目的 6) 请勿将电池丢入火中	

产品简介

一、治疗原理

XFT-320型低频治疗仪主要原理是：运用先进电子技术，产生有治病作用的各种脉冲电刺激人体，有效疏通经络，并沿着经络这条低阻值线向其所属各脏腑器官传导，抑制疼痛出现，激活、调节和修复所控制脏腑的神经系统及器官、生理机能，平衡阴阳，调节内分泌，增强新陈代谢与提高机体免疫能力。同时扩张血管、降低血压、改善人体各部的血液循环，从而达到舒筋镇痛、益气活血、消肿化瘀以及通则不痛的治疗与保健养生目的。

低频治疗仪所产生的推拿、针灸、捶背、刮痧、拔火罐等多种高能量脉冲，还能锻炼与强化肌肉、血管与神经功能。长期使用可防止肌肉萎缩、机能退化、机体麻木等慢性疾病的发生与发展，轻度的还可达到治愈效果。人体肌肉的泵式作用是于低频电流引起肌肉收缩或松弛来完成的，松弛时，血液就大量输入，收缩时，含有代谢物的血液就送出，这种过程循环往复，促进了血液循环，达到各种治疗的效果。

二、功能特点

双通道设计，配有四片电极。

推拿、捶打、揉捏三种可选模式，模拟真手按摩效果。

针对使用频率最高的四个部位设置的最快最有效果的自动模式。

独有的电子针设计，可以治疗电极片所接触不到的穴位。

反复键设计，可以让你重复享受喜爱的刺激。

柔和的启动模式设置。

15分钟自动关机的安全设计。

三、适用范围

消除肩膀僵硬。

缓和末梢神经麻痹。


解除神经紧张和肌肉疼痛。

消除疲劳。

促进血液循环。

四、产品构成

按键功能说明

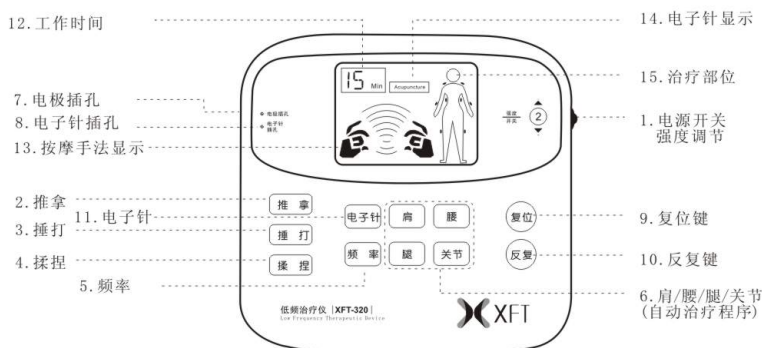

- 1、[强度/开关]旋钮：电源的开关和调节刺激的强度；（按摩强度1-10级可调节）
- 2、推拿：按此键，进行“推拿”程序治疗方式，并在显示屏幕中伴有形象的推拿动作；
- 3、捶打：按此键，进行“捶打”程序治疗方式，并在显示屏幕中伴有形象的捶打动作；
- 4、揉捏：按此键，进行“揉捏”程序治疗方式，并在显示屏幕中伴有形象的振动动作；
- 5、频率：按此键对治疗程序的速度1-5级范围可调节，当一直按到速度增加到最快时，再返回到初始状态；
- 6、肩：按此键，进行肩部最快最有效的自动治疗程序；
腰：按此键，进行腰部最快最有效的自动治疗程序；
腿：进行腿部最快最有效的自动治疗程序；
关节：按此键，进行肩部最快最有效的自动治疗程序；
- 7、电极插孔：把电极线端子插入插孔；
- 8、电子针插孔：把电子针线或电极线端子插入插孔；
- 9、复位键：按此键，可快速恢复到初始状态的刺激强度；
- 10、反复键：按此键，针对喜欢的按摩效果，可反复使用喜欢的治疗；
- 11、电子针键：按此键，进入电子针的工作状态，此时其它治疗功能将不起作用；
- 12、工作时间：表示按摩结束剩余时间的显示；
- 13、按摩手法显示：表示推拿、捶打、揉捏三种方式；
- 14、电子针显示：表示使用电子针状态；
- 15、治疗部位：显示正在进行治疗的部位；


五、其它组件



按摩膏(GEL)



帖板

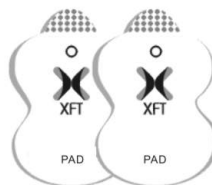

电极片



电子针



试机电池(7号×2)




电极线

- 若没有按摩膏时，也可以使用水溶性雪花膏或纯净水替代。
- 电极片为消耗品，若多次清洗仍不能恢复其粘着力时，请考虑购买新的电极片。
- 试机电池，是用于确认商品的功能，因而使用寿命可能达不到3个月。

产品使用方法


一、安装电池

- 1、将电池盒盖按箭头的方向，轻轻压下向底部推出，打开电池盒；
- 2、装入2节7号电池，并注意极性；
- 3、盖紧盒盖；
- 4、使用质量较好的电池，以避免出现漏液等情况而引起故障；
- 5、使用一段时间后，刺激强度太弱或不能正常工作时，可能是电池即将耗尽，请更换电池；

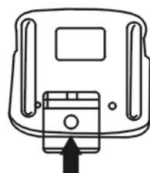

二、导线连接

- 1、把[强度 / 开关]旋钮调到“OFF”位置；
- 2、将导线的插头插入电极插孔；

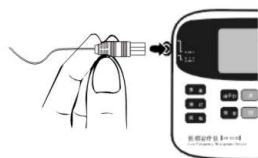

- 3、将导线与电极片连上。



连接导线时请注意

- 请勿任意弯曲或拉伸导线
- 从主机拔出导线时应抓住插头拔出
- 若导线断裂而出现故障时，请与销售商联系。

三、粘贴电极片

- 1、粘贴在治疗部位时，请尽量不要使电极片弯曲；
- 2、使用时，请将电极片从粘板上揭下来；
- 3、粘贴在腰、肩等部位时，自己粘贴可能比较困难，此时需要其他人的帮助；
- 4、请将电极片紧密的粘贴在皮肤上；



请将电极片贴在想治疗的部位（酸楚疼痛部位）

* 将电极片从皮肤上取下，约15秒钟后电源自动关闭；




贴片示例



使用电极片时请注意：

- 请尽量不用手指接触粘贴面。
- 淋浴后或者运动出汗时，请擦干净要治疗的部位后再使用。
- 如粘性下降时请妥善处理，用水冲洗过的电极片，让粘贴面自然干燥后再使用。
- 请勿将电极片与他人共同使用（包括家属），以免交叉感染皮肤病。

粘贴参考要点

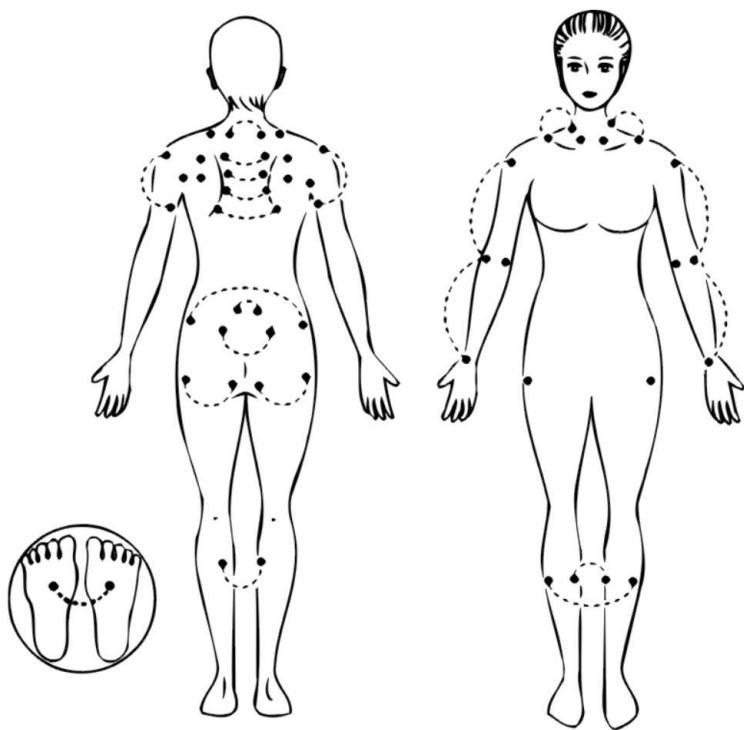

四、治疗使用方法：

1、打开电源

向下旋转[强弱 /开关]旋钮。[咔哒]一声响，电源被打开，治疗开始。

2、选择治疗方式和强度调节

将[强弱/开关]旋钮向上拨到“1”，然后选择治疗方式[推拿、捶打、揉捏、电子针灸]，屏幕上会出现相应的图案。根据自身的感受调节强度，即可开始治疗，强度可在1~10之间调节，可自行选择适当的强度。

3、使用电子针进行治疗时，必须先接好电子针导线，均匀涂少许按摩油在治疗部位，在开启开关后，按“电子针”键，并调节强度，开始针灸治疗操作。

4、有效地使用方法

- 低频治疗仪治疗一次为15分钟，1日1-2次。
- 饭后休息30分钟后使用。沐浴后使用效果最好。
- 电极片应贴在所需治疗的正确部位。

电子针有效地使用法：

- 1) 使用前，在所需治疗部位涂上按摩膏。
- 2) 使用电子针时，一定要使电子针垂直地贴在皮肤上。
- 3) 根据不同的部位，电子针治疗的强度在5-10秒之内徐徐上升，根据个人感受可以通过电位器调节1-10级的强度。
- 4) 特别是用电子针治疗穴位时，一定要使用正确的治疗姿势，10秒钟左右，当感觉强度变弱或没有反应时，这可能是电子针与穴位有一定的距离。（反应最强的部位是穴位点）
- 5) 根据不同的症状，选择不同的强度来治疗。强度调高一级，治疗10秒后，休息5秒，这样反复使用。使用时间看症状的强度，一般治疗一次为5到15分钟以内，1日2到3次为宜。
- 6) 如使用电子针的部位有变红现象，不是副作用，稍微过一段时间后会恢复正常。
- 7) 按摩膏为水溶性，治疗后不用擦干也会慢慢挥发。

5、电子针使用注意事项

使用电子针时，注意以下事项：

- 1) 不要用在眼皮上。
- 2) 戴表、戴戒指、戴金属的部位不得使用。
- 3) 淋浴后，人体有水珠的部位不得使用（否则易发生故障）。
- 4) 当按摩膏使用完时，也可以用少量的水代替进行治疗。
- 5) 儿童在没有大人的情况下不得使用。使用完后，请放在儿童触摸不到的地方保管。

五、收藏

电极片裸露放置，容易变脏而使粘性下降，所以治疗完成后请把电极片贴在粘板上。

- 1、关上电源，从主机上拔下导线插头；



- 2、从皮肤上抓住一角取下电极片，
请不要用手指大面积接触粘贴面；




(电极片不能重叠)

- 3、把电极片轻轻贴在粘板上。

※连接电极片的按扣可以一直放在电极片上。

※请勿用力压电极片，会造成粘贴面损伤。

※请保持电极片粘板的清洁。

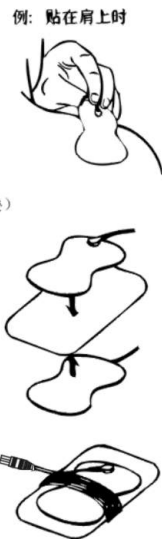

4. 将导线绕在粘板上。

※绕导线时应松紧适度。

5. 将主机与粘板一起装入包装盒中。

保 养 和 保 管

电极片

保养方法

- 电极片粘贴面应保持清洁，避免粘上灰尘、油性物、粘性物等污物，否则粘性会下降。
- 请把电极片粘贴在存放板上进行保存，不要任意粘在其它物品上，避免损伤电极片。
- 电极片因脏污而使粘性下降时或皮肤有刺痛感时，用少量水冲洗，同时用手指轻轻擦洗数秒，充分干燥后可暂时恢复其粘贴性。但若用水过多，则会使粘性下降。
- 请不要用纸巾、布等擦粘贴面。
- 请不要用指甲、刷子等刮伤粘贴面。

※电极片的更换周期因人而异，大约50次左右。

※请不要频繁清洗，请不要使用洗涤剂、热水清洗。

保管注意事项

- 请勿放在阳光直射、高温、潮湿、灰尘多、腐蚀性气体多的地方保管。
- 请放在儿童触摸不到的地方。

主机

保养方法

- 请经常清洁主机。
- 关掉电源后，请务必把导线从主机和电极片上拔下来进行保管。
- 主机如有脏污，请用干的软布进行擦拭。
- 如果主机特别脏，则可将软布沾有水或中性洗涤剂，充分拧干后擦拭主机。必要时可用浸过医用酒精（酒精浓度为75%）的抹布进行清洁或消毒。

※请不要使用其它挥发性制剂擦拭。

※请不要让水等液体流入主机内部。

保管注意事项

- 主机脏污时，请勿用稀释剂、汽油等进行擦拭。
- 请勿放在阳光直射、高温、潮湿、灰尘多、腐蚀性气体多的地方保管。
- 请放在儿童触摸不到的地方。
- 长期（3个月以上）不使用时，请取出电池保管。

※若您不遵守以上的注意事项及其它正确使用方法，本公司将不承担质量责任。

Q&A

在紧张的社会中，感到疲惫，疼痛的人正在逐步增多。

产生疲惫，疼痛主要有以下三个原因：



社会性因素

日常工作，与上级或同事之间的关系，晋级问题等工作单位方面的事情，育儿、夫妇之间等问题。处事为人中的耗力劳神等因素。



精神上的因素

在自我意识过强或相反有自卑感时，此外，还有分配给自己不相适应的工作或任务时的精神负担因素。



物理性环境因素

桌椅的高度与身体不相适合，不得不采用某种不良姿势进行工作等不良工作环境因素。

什么是低频理疗法？

低频理疗法是将微弱电流(低频)通过人体利用其刺激直接对肌肉进行按摩，并镇静兴奋了的神经，促时血液循环，从而促使因肌肉僵硬所引起的疼痛等自然恢复的辅助性物理疗法。

Q&A

Q1

电极片可以使用几次？

A1

约10次~50次，皮肤上污痕会降低使用次数。
若粘着力下降时，用净水冲洗后再用湿布轻轻擦拭，即可恢复粘着力。

Q2

理疗时间大约多长为宜？

A2

基本上理疗一处的时间大约为15分钟，若持续理疗的时间超过15分钟时，则会引起相反的不良效果。

Q3

一次是否可以理疗若干部位？

A3

理疗部位不限，但是必须遵守15分钟以内的限制。

Q4

什么时候理疗最为有效？

A4

洗澡后理疗效果最佳。
此时的身体暖和，能更好地促进血液循环。

Q5

在什么情况下禁止使用？

A5

- 发烧时
特别是原因不明，疑有患重病迹象时。
- 月经期
月经周期紊乱，亦可成为身体不适之原因。
- 妊娠中、产后
体内激素失去平衡，请勿使用。
- 高血压
血管负担增大。
尤其禁止在头部使用。

故障及解决方案

操作XFT-320低频治疗仪时如果出现问题，请进行以下检查。如果还是无法排除故障或仍然无法操作理想，请关闭电源并且联系讯丰通客服中心。

异常现象	原因	处理办法
无法开启电源	干电池方向装错	请正确装入干电池
	电极片没有贴在皮肤上	没贴在皮肤上，电源会自动断电
	电极片从皮肤上脱落	没贴在皮肤上，电源会自动断电
	干电池能量耗尽	请更换干电池
	开机15分钟后，电源会自动断电	不使用时，请把「强度/电源」按钮拨至「关」，否则电池能量会提前耗尽
	导线断了	更换导线
粘贴面发粘	电极片粘贴面脏污	用少量水冲洗，同时用手指轻轻擦洗数秒，自然干燥后再使用
	水洗后直接使用	让粘贴面自然干燥后再使用
	电极片粘贴面损伤	电极片是消耗品，请更换新的
	放在高温多湿，阳光直射的地方了	用少量水冲洗，同时用手指轻轻擦洗数秒，自然干燥后再使用
	出汗时使用了	
	长时间或频繁的水洗了	电极片是消耗品，请更换新的
感觉不到刺激或刺激很弱	电极片没有紧贴皮肤	请把电极片紧贴皮肤
	电极片重叠	请不要重叠使用电极片
	导线没有正确连接	请正确连接导线
	强度调的太弱	调整「强度/电源」旋钮
	干电池能量耗尽	请更换干电池
	电极片粘贴面损伤	电极片是消耗品，请更换新的
皮肤变红 皮肤有针刺的感觉	治疗时间太长	合适的时间为10-15分钟
	电极片没有紧贴皮肤	请把电极片紧贴皮肤
	电极片粘贴面脏污、干燥	用少量水冲洗，同时用手指轻轻擦洗数秒，自然干燥后再使用
	电极片粘贴面损伤	电极片是消耗品，请更换新的
电子针没感觉	1. 用按摩膏了吗	涂按摩膏
	2. 与皮肤接触正常	将电子针针灸笔紧贴皮肤

产品规格

品名	低频治疗仪		
型号	XFT-320		
电压	DC3V（AAA）电池1.5V*2个7号电池）		
输出频率	1-300HZ		
电池使用时间	约3个月：1日1次连续使用15分钟		
尺寸	L130*W127*H27MM		
产品重量	200g		
附件	电极线	（2条）	
	电子针	（1支）	
	按摩膏	（1支）	
	电 池	（1对）	
	说明书	（1本）	
	电极片	（2对）	



- 可以在讯丰通（XFT）指定经销商处购买或致电讯丰通（XFT）客户服务中心

售后服务

保修声明

- 1、本产品在正常使用情况下，产品若出现质量问题，一年内免费保修，三年内有限维修（维修期收取配件成本）。
- 2、保修期的起始日期自购买本产品之日（凭购买发票）计算。
- 3、维修时请出示保修卡和发票。
- 4、请妥善保管保修卡，保修卡遗失不补，所填购买日期须与发货票原号标注相符，否则无效。
- 5、在保修期内，凡属产品自身原因产生的故障，均属保修范围。
- 6、保修服务不包括外壳、说明书、包装等主机外的配件。
- 7、超过保修期限或者有下列情况的，将根据实际情况收取维修费用：
 - a. 无有效购买凭证和保修卡者。
 - b. 未按说明书的要求操作或自行拆修、改装致使产品损坏者。
 - c. 零配件自然消耗者。
 - d. 进行不适当的连接使用、接入不当电压的电源、及长时间不用造成电池铜片损坏者。
 - e. 因不可抗力造成的故障或损坏。
 - f. 顾客对本产品保养不当者。
- 8、技术咨询：用户在使用过程中遇到任何问题，请拨打客服热线：0755-27345046

标准号：YZB/粤0042《低频电子脉冲治疗仪》

注册号：粤食药管械（准）字2004第2260310号

生产许可证号：粤药管械生产许20030836号

制 造 商：深圳市讯丰通电子有限公司

地 址：深圳市宝安区福永镇凤凰（城建）工业区C栋第三层

客服热线：0755-27345046

传真：0755-27337099

免费电话：800-830-9205

邮 编：518103

网 址：<http://www.xft.cn>

邮 箱：xft@xft.cn